




מכשיר גלי הלם Shockwave לטיפול בכאב ושיקום

טיפול בגלי הלם Ortho Shockwave

Ortho Shockwave

מהו טיפול בגלי הלם רדיאליים?

- טיפול בגלי הלם רדיאליים הוא שיטה לטיפול בהפרעות אורתופדיות. קליע המואץ בתוך ידית המכשיר יוצר גל לחץ מכני, המועבר לגוף באמצעות ראש הטיפול ומתפשט ברקמות. האנרגיה המכנית נספגת ברקמה ופוחתת ככל שהמרחק מאזור הטיפול גדל. העומס המכני מעורר תגובות ברקמה, שלהן השפעה חיובית על מגוון רחב של מצבים אורתופדיים ונוירולוגיים.

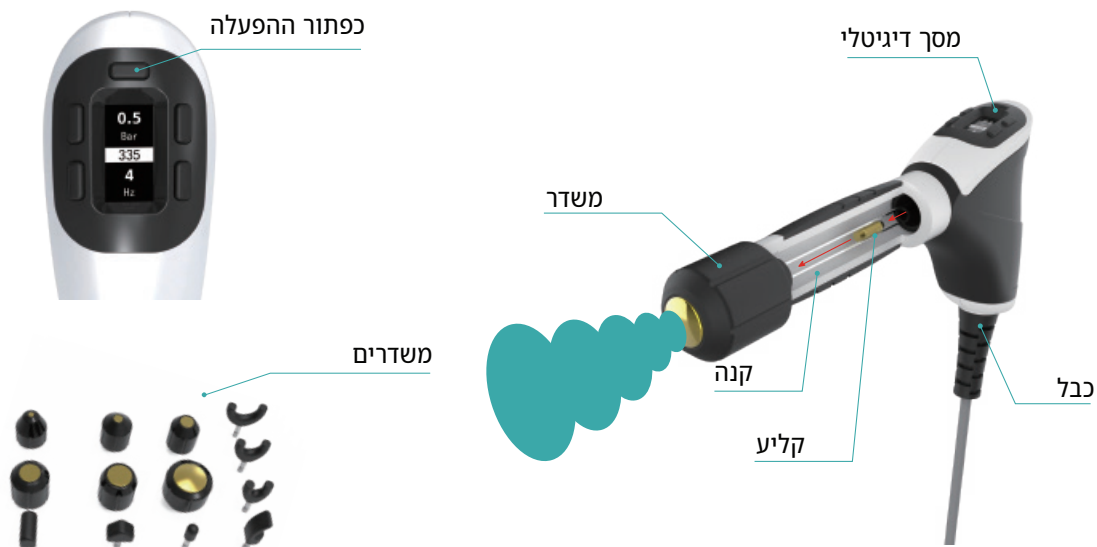

טיפול בגלי הלם

טיפול בגלי הלם יעיל לשיקום ומשמש לעיתים קרובות לטיפול בכאבים כרוניים או בפציעות כגון דלקת ברצועת כף הרגל (Plantar Fasciitis), מרפק טניס ודלקות גידים בכתף.



- 21Hz & 10Bar – עוצמה גבוהה
- 0.1Bar – ויסות אנרגיה מדויק
- 4–8 ס"מ – חדירה לעומק הרקמה
- 13 יחידות – ראשי טיפול זמינים
- 10,000,000 – אורך חיים של הפולסים (Shots)

גלי הלם לטיפול בכאב

טיפול בגלי הלם מצויד ב-6 משדרים, המיועדים במיוחד לטיפול בכאב ומתאימים לאזורי טיפול שונים. המשדרים המשודרגים מספקים עוצמה גבוהה יותר ומאפשרים חדירת אנרגיה עמוקה יותר, ובכך תורמים ליעילות גבוהה יותר בטיפול בכאב.



טיפול בכאב



טיפול בגלי הלם

לטיפול בפאשיה

טיפול בגלי הלם מסייע לשחרור הדרגתי של נקודות טריגר והידבקויות בשרירים וברקמת הפאשיה הפגועים באמצעות לחץ טיפולי והחלקה. טיפול זה עשוי לספק הקלה משמעותית בכאב.



F-A4



F-A3



F-A2



F-A1

ייעודי לפאשיה

טיפול בגלי הלם

לטיפול בעמוד השדרה

טיפול בגלי הלם הוא פרוטוקול טיפולי למצבים ניווניים, לפתולוגיות אוסטאופורוטיות של מערכת העצבים, להסתיידות הטרטופית בעקבות פגיעה בחוט השדרה, לספונדילוזיס צווארי, לעקמת (סקוליוזיס), לסקרואילאיטיס ולכאבים בעצם הזנב (קוקסידיניה).



C35



C28



C20


ייעודי לעמוד השדרה





טיפול בגלי הלם

- מאפשר כוונת מדויק של עוצמת האנרגיה בדיוק של עד 0.1 Bar.
- מספק טיפול בעוצמה גבוהה של 10 Bar ובתדירות של 21 Hz לתוצאות מיטביות.
- מאפשר חדירה לעומק של 4-8 ס"מ לטיפול ממוקד.
- עד 10,000,000 פולסים לביצועים לאורך זמן.

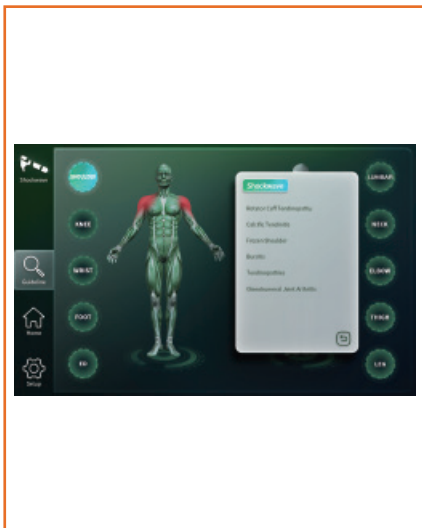

ממשק משתמש חכם

- מסך מגע בגודל 12.1 אינץ'
- שליטה מדויקת בפרמטרים
- מדריך עזר שימושי לתסמינים באזורים שונים בגוף
- תוכנה חכמה עם פרמטרי ברירת מחדל ופרוטוקולים קליניים



טיפים נוספים ליישומים

- 13 יחידות משדרים כלולים
- 6 יחידות משדרים לטיפול בכאב
- 4 יחידות משדרים לטיפול בפאשיה
- 3 יחידות משדרים לטיפול בעמוד השדרה

נתונים טכניים

Ortho Shockwave
גלי הלם פנאומטיים
שיכוך כאבים, פיזיותרפיה

דגם:
טכנולוגיה:
ייעוד:



עוצמת גלי ההלם: Hz 21 / Bar 10
מספר המשדרים: 13 יחידות
טיפול בכאב: 6 יחידות
טיפול בפאשיה: 4 יחידות
טיפול בעמוד השדרה: 3 יחידות

מסך מגע: 12.1 אינץ'
מידות האריזה: 60 × 58 × 44 ס"מ
משקל ברוטו: 34 ק"ג

אורתו ויל מתמחה באספקת פתרונות מתקדמים לפיזיותרפיה ושיקום, ומציעה מגוון רחב של מכשור מקצועי המשלב טכנולוגיה חדשנית, איכות גבוהה ואמינות. סל המוצרים שלנו כולל מכשירי Shockwave, TECAR, Magnetotherapy, Ultrasound, Laser Therapy, Infrared ו-EMS, המיועדים למרפאות פיזיותרפיה, מרכזי שיקום ואנשי מקצוע.

באורתו ויל אנו בוחרים בקפידה את המכשור שלנו בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים של איכות וביצועים, תוך דגש על יעילות קלינית, נוחות שימוש ואמינות לאורך זמן. לצד המכשור, אנו מספקים הדרכה מקצועית, סרטוני הדרכה, פרוטוקולי טיפול וליווי מקצועי, כדי לאפשר לכל פיזיותרפיסט להפיק את המרב מכל מערכת.

אנו מחויבים לשירות אישי, זמינות גבוהה ותמיכה טכנית מהירה לאורך כל הדרך. המטרה שלנו היא לבנות שותפות מקצועית ארוכת טווח עם כל לקוח ולהעניק פתרונות מתקדמים המסייעים לשפר את איכות הטיפול והתוצאות הקליניות.

טיפול בגלי הלם Ortho Shockwave

0542002982

[/https://orthowell.co.il](https://orthowell.co.il)

<https://www.instagram.com/orthowell.1?igsh=MW5tdGx1bmdna2tmbg==>

<https://www.facebook.com/profile.php?id=61574856938310>